

NOTKUNARLEIÐBEININGAR - FARGIÐ EKKI

IS

ASPAVELI® enFuse® húðfest lyfjagjafarkerfi (pegcetacoplan)

Fyrir gjöf ASPAVELI® undir húð á kvið Einnota húðfest lyfjagjafarkerfi

Lesið þessar notkunarleiðbeiningar áður en notkun húðfesta lyfjagjafarkerfisins hefst og í hvert sinn sem þú færð nýtt húðfest lyfjagjafarkerfi þar sem nýjar upplýsingar gætu komið fram. Geymdu þessar notkunarleiðbeiningar eftir fyrsta skammtinn, þar sem þú gætir þurft á þeim að halda fyrir síðari skammta. Húðfesta lyfjagjafartækið er sett á líkamann til að gefa lyf undir húð. Þessar upplýsingar koma ekki í stað þess að ræða við lækni eða hjúkrunarfræðing um heilsufar þitt eða meðferðina. Sjúklingnum eða umönnunaraðilanum verður leiðbeint af hæfum heilbrigðisstarfsmanni um notkun húðfesta lyfjagjafarkerfisins samkvæmt ASPAVELI fylgiseðlinum. Ákvörðun um möguleikann á að sjúklingur gefi sér sjálfur lyf og lyfjagjöf með innrennsli heima við ætti að taka eftir mat og ráðleggingar læknisins sem sér um meðferðina. Spurðu heilbrigðisstarfsmanninn um leiðbeiningar sem þú skilur ekki.


Tilætlaður tilgangur – ASPAVELI® enFuse® húðfesta lyfjagjafarkerfið er ætlað til að gefa ASPAVELI 1 080 mg innrennsli lyf, laus undir húð á kvið.

Ábendingar fyrir notkun – ASPAVELI® enFuse® húðfesta lyfjagjafarkerfið er ætlað til lyfjagjafar undir kvið með ASPAVELI 1 080 mg innrennsli lyf, laus fyrir unglinga (12–17 ára) og fullorðna sjúklinga.

Markhópur/-hópar sjúklinga – Unglingar (12–17 ára og ≥ 30 kg) og fullorðnir (18+ ára) í samræmi við vörurköfur ASPAVELI 1 080 mg innrennsli lyfjagjafar.

Fyrirhugaðir notendur – Heilbrigðisstarfsmenn, umönnunaraðilar og sjúklingar (12 ára og eldri).

Hlutar ASPAVELI® enFuse® húðfests lyfjagjafarkerfi

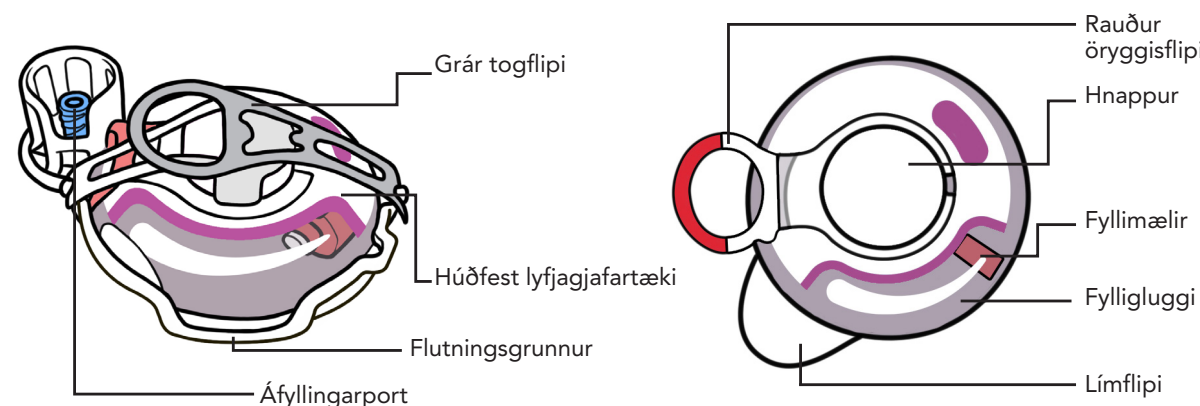

Húðfest lyfjagjafartæki í sprautuflutningsgrunni

Húðfest lyfjagjafartæki

Vörulýsing:

ASPAVELI enFuse húðfesta lyfjagjafarkerfið er dauðhreinsað, ekki sótthitavaldandi, áfyllt af notanda, einnota, lyfjagjafarkerfi með föstum skammti undir húð. ASPAVELI enFuse húðfesta lyfjagjafarkerfið samanstendur af tækinu (húðfest lyfjagjafartæki) og fyrirsæslubúnaði sprautu (flutningsgrunn). Húðfesta lyfjagjafartækið notar teygjanlega blöðru til að gefa ASPAVELI lyfjavöruna og inniheldur samþætta nál sem er stungið inn í rýmið undir húðinni þegar hnappurinn hefur verið virkjaður. Hönnun húðfesta lyfjagjafartækisins notast við „stöðugan þrýsting“ frekar en fyrirfram stíltan, stöðugan flæðihraða; markflæðihraði in vitro næst með sérsníðnum nálarstærðum. Límbakhlíð á húðfesta lyfjagjafartækinu, sem er útsett þegar húðfesta lyfjagjafartækið er fjarlægð úr flutningsgrunninum, gerir kleift að festa tækið beint við húðina meðan á gjöf undir húð stendur. Flutningsgrunnurinn er ætlaður fyrir eina (1) einnota sprautuinnsetningu og flutning ASPAVELI þegar áfyllt, fyrirfram mæld sprautu með luer-festingu er fest á (samhæft við sprautu sem uppfylla ISO 80369-7 kröfur). Húðfesta lyfjagjafarkerfið er fullkomlega vélrænt og inniheldur hvorki rafeindabúnað né hugbúnað.

Viðvaranir:


- Viðvörðun!** Geymist fjarri börnum 3 ára og yngri. Inniheldur smáhluti.
- Notið **ekki** húðfesta lyfjagjafarkerfið ef innsiglaður merkið hefur verið rofinn.
- Notið **ekki** ef húðfesta lyfjagjafarkerfið hefur fallið á jörðina eða ef það virðist skemmt.
- Notið **ekki** ef innsiglaður plastbakki er opin eða skemmdur.
- Notið **ekki** ef fyringardagsetningin á kassanum er liðin.
- EKKI** endurnýta húðfesta lyfjagjafartækið.
- Geymið **ekki** áfyllt húðfest lyfjagjafartæki.
- Snertið **ekki** hvíta límið á botni húðfesta lyfjagjafartækisins áður en það er fest á kviðinn.
- EKKI** láta fót snerta hreina staðinn.
- EKKI** fjarlægja húðfesta lyfjagjafartækið úr húðinni fyrr en hnappurinn springur út.
- EKKI** fleygja (farga) húðfesta lyfjagjafartækinu í ruslið.
- EKKI** losa húðfesta lyfjagjafartækið úr húðinni við skammtagjöf.
- EKKI** nota efni til að halda húðfestu lyfjagjafartæki á sínum stað sem gæti þjappað húðfesta lyfjagjafartækinu við húðina.
- EKKI** setja neina hluti í áfyllingarportid aðra en áfylltu sprautuna.

Varúðarráðstafanir:

- EKKI** nota húðfesta lyfjagjafarkerfið ef sjúklingurinn er með húðsjúkdóm á kviðnum (gjafarstað).
- Gakktu úr skugga um að sjúklingurinn sé ekki í þröngum fötum þannig að þau séu ekki í vegi fyrir húðfesta lyfjagjafartækinu.
- EKKI** geyma húðfesta lyfjagjafarkerfið utan geymsluskilyrða.
- EKKI** nota húðfesta lyfjagjafarkerfið utan notkunarskilyrða.
- EKKI** setja húðfesta lyfjagjafartækið á eftir beltislinunni eða á svæði þar sem húðfesta lyfjagjafarkerfið verður fyrir áhrifum af fellingum í húðinni.
- EKKI** fjarlægja rauða öryggisflípann fyrr en húðfesta lyfjagjafartækið er fest við líkamann.
- Veldu skammtagjafarstað að minnsta kosti 2,5 cm frá jaðri næfla sjúklings og jaðri húðfesta lyfjagjafartækisins og 2,5 cm frá síðasta skammtagjafarstað. Notaðu húðfesta lyfjagjafartækið aðeins á kviði.
- EKKI** baða þig, fara í sturtu, hreyfa þig, nota heita potta, nuddpott eða gufubá. Forðastu að kvíðurinn blotni. Húðfesta lyfjagjafartækið er ekki vatnshelt. Vatn eða sviti getur losað húðfesta lyfjagjafartækið úr húðinni.
- EKKI** sofa meðan á skammtagjöf stendur.
- Forðastu mikla líkamlega áreynslu.
- EKKI** rekast í eða banka á húðfesta lyfjagjafartækið.
- EKKI** rekast í hnapp húðfesta lyfjagjafartækisins.


Klínískur ávinningur:

Stór, handfrjáls skammtagjöf ASPAVELI (pegcetacoplan) í kviðarholsrými undir húð sem bætir meðhöndlun sjúklinga með því að draga úr álagi á notandann.

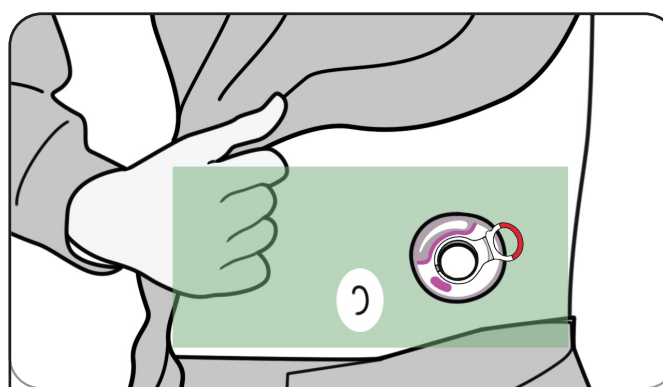

Þegar þú hefur lokið skrefum 1–9 er **niðurstaðan** sú að festa húðfesta lyfjagjafartækið á kviðinn.

Nauðsynlegar birgðir fyrir skammtagjöf

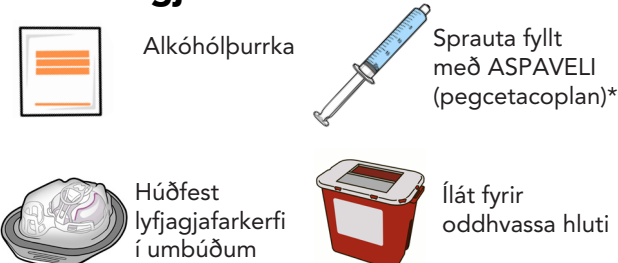


*Sjá fylgiseðil ASPAVELI varðandi leiðbeiningar fyrir að undirbúa og fylla á sprautu. Húðfesta lyfjagjafartækið gefur flutta magnið. Ekki er hægt að breyta magninu eftir áfyllingu.


Fylltu húðfesta lyfjagjafartækið með ASPAVELI-vökva




- Þvoðu hendur vandlega með vatni og sápu.
- Þurrkaðu hendurnar.
- Flettu hlífinni af og fjarlægðu glæru umbúðirnar.

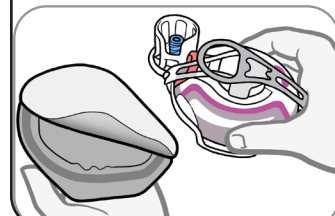


- Fjarlægðu húðfesta lyfjagjafartækið og nærliggjandi flutningsgrunn úr umbúðunum. Settu það á hreinan flöt.

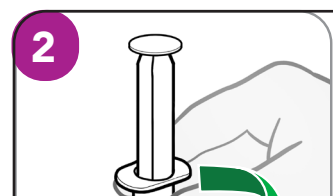


- Taktu upp sprautuna sem er fyllt með ASPAVELI (pegcetacoplan).
- Tvíyfirfarðu hvort þú hafir dregið ávísaðan skammt.
- Fyllta sprautan gæti verið með luer-tappa; ef svo er skaltu snúa til vinstri (rangsælis) til að fjarlægja tappann.
- Snúðu** fyllta sprautuendanum til hægri (réttssælis) í áfyllingaropid þar til hann er þéttur.

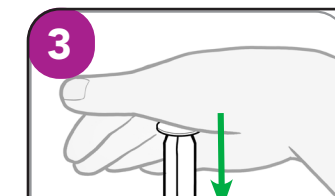

- Þrýstu stimpli sprautunnar þétt niður. Það getur verið erfitt að þrýsta sprautustimplinum niður.
- Fylgstu með áfyllingarmælinum þegar ASPAVELI (pegcetacoplan) er ýtt inn í húðfesta lyfjagjafartækið.

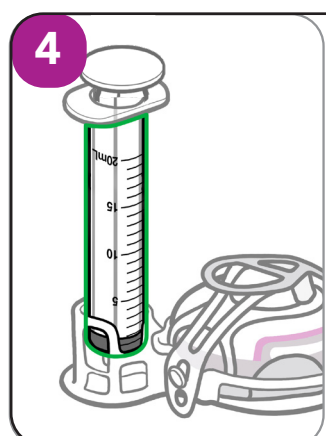

- Gakktu úr skugga um að sprautan sé tóm. Ef þörf krefur skaltu þrýsta stimpli sprautunnar þétt niður aftur.
- EKKI** fjarlægja tóma sprautu úr flutningsgrunninum.
- Eftir að húðfesta lyfjagjafartækið hefur verið fyllt skal halda áfram með undirbúning og skammtagjöf.
- Geymið **ekki** áfyllt húðfest lyfjagjafartæki.

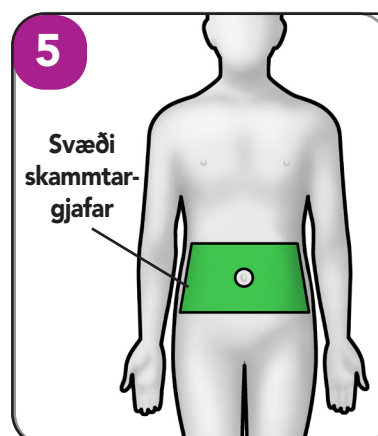


- Ákvarðaðu hvar á að setja húðfesta lyfjagjafartækið á beran kviðinn.
- ⚠ Notaðu húðfesta lyfjagjafartækið aðeins á kviði.
- Veldu staðsetningu:
 - Að minnsta kosti 2,5 cm frá jaðri næflans á sjúklingnum og jaðri húðfesta lyfjagjafartækisins.
 - OG
 - Að minnsta kosti 2,5 cm frá síðasta gjafarstað.
- ⚠ Forðastu að velja stað sem er viðkvæmur, marinn, rauður, harður, ertur, ör, húðflúraður eða með húðslit.
- EKKI** setja húðfesta lyfjagjafartækið á eftir beltislinunni eða á svæði þar sem húðfesta lyfjagjafarkerfið verður fyrir áhrifum af fellingum í húðinni.
- ⚠ Gakktu úr skugga um að sjúklingurinn sé ekki í þröngum fötum þannig að þau séu ekki í vegi fyrir húðfesta lyfjagjafartækinu.




- Hreinsaðu staðinn með alkóhólþurrku.
- Leyfðu staðnum að þorna í að minnsta kosti 30 sekúndur.
- EKKI** snerta, blása með viftu, blása á eða láta fót snerta hreina svæðið.

Fjarlægðu húðfesta lyfjagjafartækið frá flutningsgrunni og festu við kviðinn

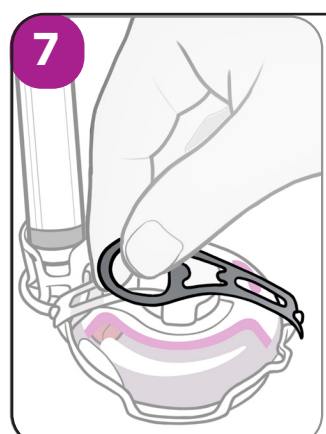


- Griptu í gráa togflípann og togaðu. Leyfðu bæði gráu og glæru flípunum að falla til hliðar.
- Flíparnir gætu fallið til hliðar eða losnað alveg af.
- EKKI** fjarlægja rauða öryggisflípann fyrr en húðfesta lyfjagjafartækið er fest við líkamann.

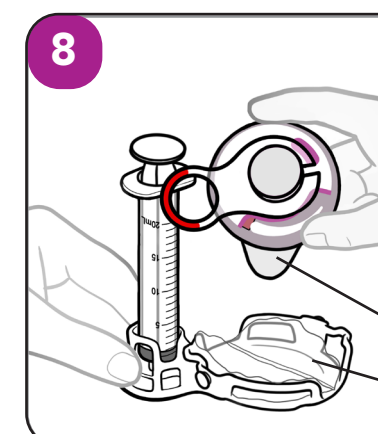

- Haltu hliðum húðfesta lyfjagjafartækisins og dragðu það beint upp til að fjarlægja það úr flutningsgrunninum.
- ⚠ **EKKI** snerta límið á botni húðfesta lyfjagjafartækisins eða brjóta límið saman á sjálfu sér.
- Hvíta límið verður áfram fest við húðfesta lyfjagjafartækið og glæra fóðrið verður áfram fest við flutningsgrunninn.
- ⚠ Gakktu úr skugga um að svæðið hafi verið hreinsað áður en húðfesta lyfjagjafartækið er fest.

Hvít límið
Glæra fóðring

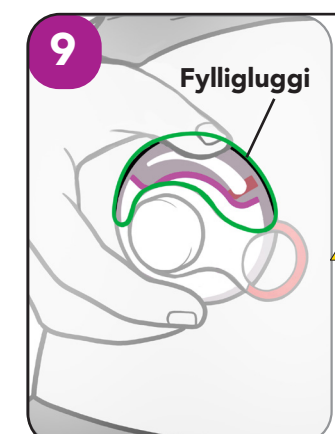

- Staðsettu húðfesta lyfjagjafartækið þannig að áfyllingarglugginn snúi upp að andliti sjúklingsins.
- Þrýstu þétt á glæra hluta húðfesta lyfjagjafartækisins til að festa við kviðinn.
- EKKI** endurstaðsetja húðfesta lyfjagjafartækið þegar það hefur verið fest við magann. Húðfesta lyfjagjafartækið virkar án tillits til stefnu áfyllingarglugga.

Tákn	Titill tákn	Skilgreining tákn
	Framleiðandi	Gefur til kynna framleiðanda lækningatækis
	Land og dagsetning framleiðslu	Gefur til kynna landið þar sem lækningatækið var framleitt og framleiðsludaginn
	Vörulistanúmer	Gefur til kynna vörulistanúmer framleiðandans svo að hægt sé að bera kennsl á lækningatækið
	Lotukóði	Gefur til kynna lotukóða framleiðanda þannig að hægt sé að bera kennsl á lotuna eða rununa
	Notist fyrir	Gefur til kynna eftir hvaða dag á ekki að nota lækningatækið
	Fylgið notkunarleiðbeiningum	Gefur til kynna að notandinn þurfi að kynna sér notkunarleiðbeiningarnar
	Varúð	Gefur til kynna að notandinn þurfi að kynna sér notkunarleiðbeiningarnar til að fá mikilvægar varúðarupplýsingar, svo sem viðvaranir og varúðarráðstafanir sem ekki er hægt, af ýmsum ástæðum, að setja fram á lækningatækinu sjálfu
	Geymsluhitasvið	Gefur til kynna þau hitamörk sem lækningatækið getur verið útsett fyrir á öruggan hátt
	Haldið þurru	Gefur til kynna lækningatæki sem þarf að verja gegn raka
	Einkvæm tækjauðkenning	Gefur til kynna auðkenningu tækis framleiðanda þannig að hægt sé að bera kennsl á tiltekið lækningatæki
	Ekki endurnota	Gefur til kynna lækningatæki sem er ætlað til einnar notkunar eða til notkunar fyrir einn sjúkling í einni aðgerð
	Dauðhreinsið ekki aftur	Gefur til kynna lækningatæki sem ekki á að dauðhreinsa aftur
	Dauðhreinsað með geislun	Gefur til kynna lækningatæki sem hefur verið dauðhreinsað með geislun
	Ekki sótthitavaldandi	Gefur til kynna lækningatæki sem er ekki sótthitavaldandi
	Ekki nota ef umbúðir eru skemmdar	Gefur til kynna lækningatæki sem ætti ekki að nota ef pakkningin hefur skemmt eða verið opnuð
	Tákn fyrir hættulegt efni fyrir kóbaltefni	Gefur til kynna að efni sé hættulegt efni í merkingum
	Lækningatæki	Gefur til kynna að hluturinn sé lækningatæki
	Viðurkenndur fulltrúi í Evrópusambandinu	Gefur til kynna viðurkenndan fulltrúa í Evrópusambandinu
	CE-merking	Merkir evrópskt tæknisamræmi
	Stakt dauðhreinsað hindrunarkerfi	Gefur til kynna stakt dauðhreinsað hindrunarkerfi
	Magn	Magn tækja sem eru í markaðsumbúðunum
	Viðurkenndur fulltrúi í Bretlandi	Gefur til kynna viðurkenndan fulltrúa í Bretlandi
	Viðurkenndur fulltrúi í Sviss	Gefur til kynna viðurkenndan fulltrúa í Sviss
	Innflytjandi	Gefur til kynna aðilann sem flytur lækningatækið inn á staðnum
	Opnist hér	Gefur til kynna hvar hægt er að opna pakkninguna
	MedEnvoy Switzerland Gotthardstrasse 28 6302 Zug Swiss	
	Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr 360 – UL International Compass House, Vision Park Histon Cambridge CB24 9BZ Bretland	
	Emergo Europe Westervoortseidijk 60, 6827 AT Arnhem Holland	
	Enable Injections, Inc. 2863 E. Sharon Road Cincinnati, OH 45241, BNA	
IFU: EnableInjections.com/ifu	Einkaleyfi: EnableInjections.com/einkaleyfi	 2797
		10132287, Endursk. A Útgefið mar. 2026

FLETTU SÍÐUNNI til að halda áfram.




Skammtagjöf hafin

10

- Haltu húðfesta lyfjagjafartækinu með einni hendi. Notaðu hina höndina til að draga rauða öryggisflípann af.
- Skammtagjöfin hefst ekki fyrr en rauði öryggisflípann hefur verið fjarlægður.

⚠ **Ekki** nota efni til að halda húðfesta lyfjagjafartækinu á sínum stað sem gæti þjappað tækinu við húð sjúklingsins.

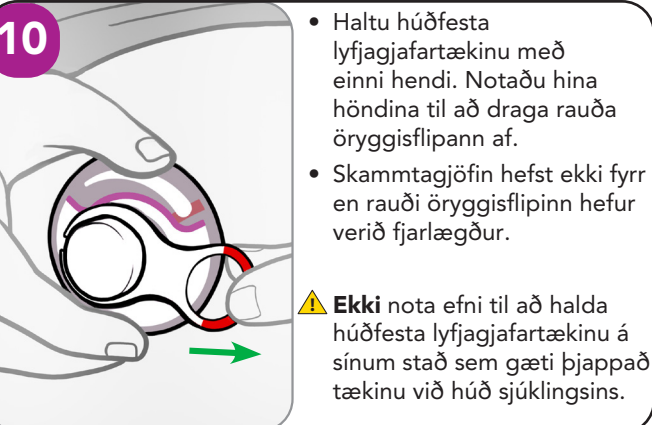

11


⚠ Með því að ýta á hnappinn stingst nálin inn í húð sjúklingsins. Sjúklingurinn gæti fundið fyrir nálinni fara inn í húðina.

- Eftir að húðfesta lyfjagjafartækið hefur verið sett á kviðinn skaltu strax ýta þétt á hnappinn þar til það er á sínum stað til að hefja skammtagjöfina.

⚠ Gættu þess að rekast ekki í, banka eða snúa húðfesta lyfjagjafartækinu eða hnappinum á meðan á skammtagjöf stendur.

⚠ **Ekki** sofa eða baða þig meðan á skammtagjöf stendur. Meðan á skammtagjöf stendur skaltu halda kviðnum alveg þurrum. Forðastu mikla líkamlega áreynslu.

- Hægt er að gera léttar daglegar athafnir meðan á skammtagjöf stendur.

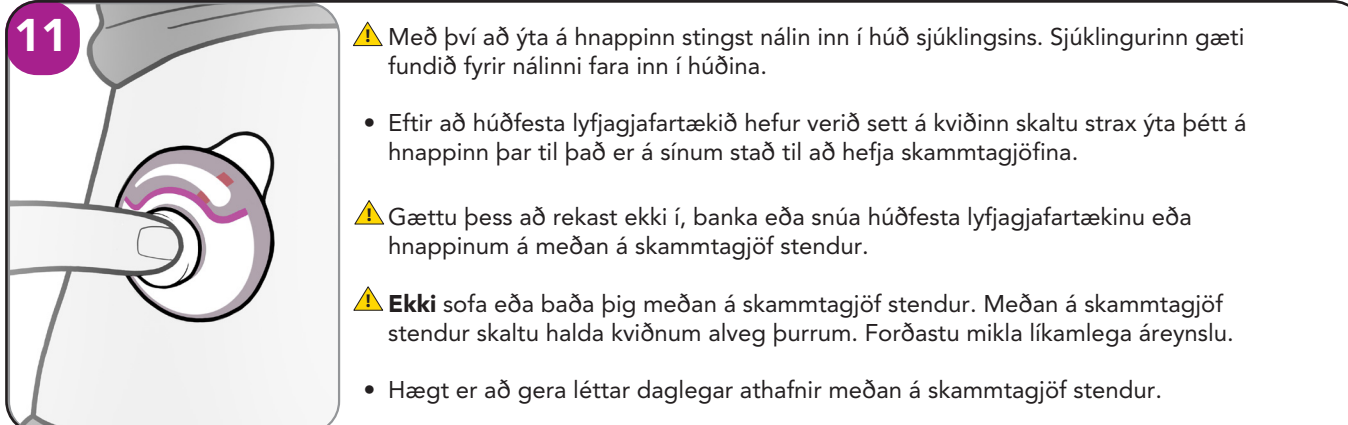

Fylgst með skammtagjöf

12


- Skammtagjöf heldur áfram svo lengi sem hnappinum er þrýst inn. Það gæti tekið um 30 til 60 mínútur að ljúka við ferlið.
- Til að fylgjast með framvindunni skaltu horfa á áfyllingarmælinn færast yfir áfyllingargluggann í átt að tómrri stöðu. Mælirinn er mat á framvindu. Hann getur tekið tíma að færast og getur gengið hægt fyrir sig.

⚠ Ef skammtagjöf tekur meira en tvær klukkustundir (120 mínútur) skal athuga Spurningar og svör kaflann.

⚠ **Ekki** fjarlægja húðfesta lyfjagjafartækið fyrr en hnappurinn springur út.

⚠ **Varúð:** Ef hnappinum er haldið niðri gerir það hlé á lyfjafæðinu. Skammtagjöf hefst aftur þegar hnappinum er sleppt.


⚠ Ef sjúklingurinn fær ofnæmisviðbrögð við líminu skal veita eða leita tafarlausrar læknishjálp.

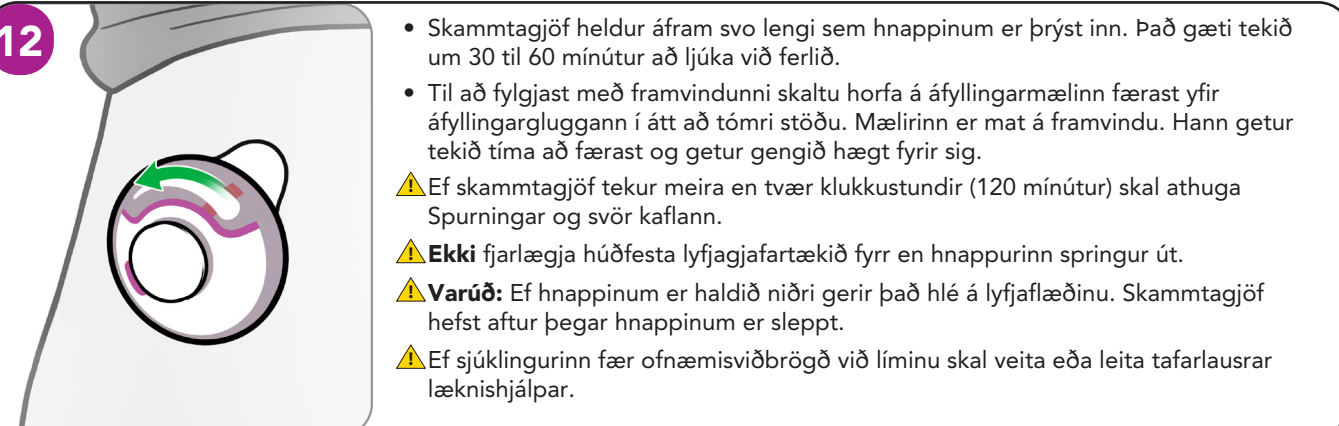

13

- Þegar hnappurinn springur út er skammtagjöf lokið og nálin dregst út úr húðinni og aftur í húðfesta lyfjagjafartækið svo það festist ekki við þig eða sjúklinginn.

⚠ **Ekki** fjarlægja húðfesta lyfjagjafartækið fyrr en hnappurinn springur út. Eina leiðin til að vita hvort skammtagjöf sé lokið er að fylgjast með því hvenær hnappurinn springur út.

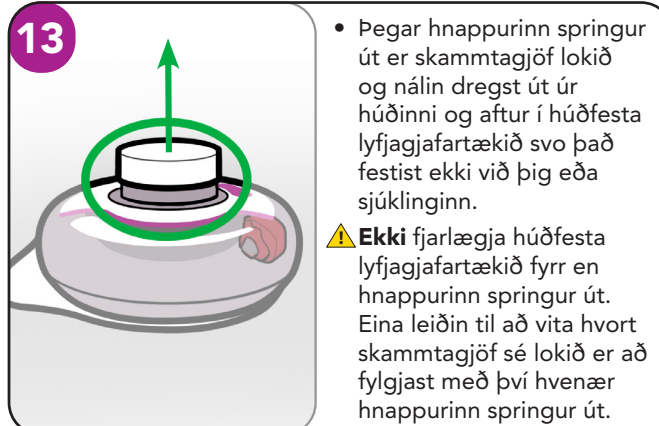


Fjarlægð tómt tæki

14

- Notaðu þumalfingur til að lyfta límflípa. Haltu límflípanum við húðfesta lyfjagjafartækið.
- Flettu húðfesta lyfjagjafartækinu hægt frá húð sjúklingsins.

⚠ **Ekki** endurnýta húðfesta lyfjagjafartækið. Frekari upplýsingar er að finna í Spurningar og svör kaflanum.

⚠ **Ekki** nudda stungustaðinn.

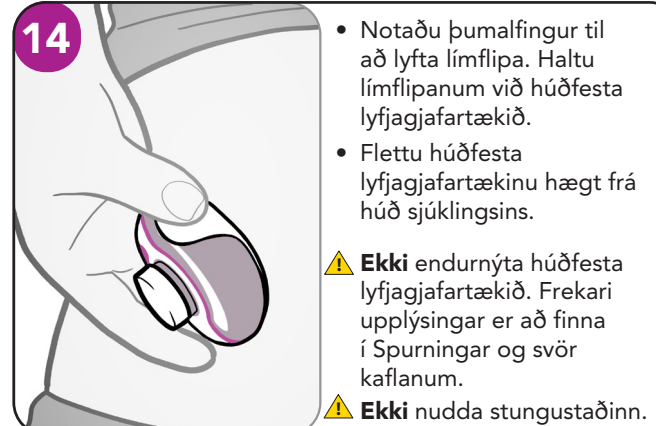

Fargaðu tómu húðfestu lyfjagjafartæki og meðfylgjandi áhöldum


15

- Settu húðfesta lyfjagjafartækið í förgunarílát fyrir oddhvassa hluti eða fargið samkvæmt gildandi reglum strax eftir notkun.
- Farga má flutningsgrunninum með tómrri sprautu áfastri, sprittþurrku og umbúðum í samræmi við staðbundnar kröfur.
- Geymdu þessar notkunarleiðbeiningar eftir fyrsta skammtinn, þar sem þú gætir þurft á þeim að halda fyrir síðari skammta.
- Kynntu þér reglur um skipulag eða staðbundna förgun til að tryggja að reglum sé fylgt.

Ef þú átt ekki ílát fyrir oddhvassa hluti máttu nota heimilislát sem er:

- úr þykku plasti,
- er hægt að loka með þéttu, stunguþolnu loki, án þess að beittir hlutir geti komið út,
- er upprétt og stöðugt meðan á notkun stendur,
- lekur ekki, og
- er vel merkt til að vara við hættulegum úrgangi í ílátinu.

- Þegar förgunarílátið fyrir oddhvassa hluti er næstum fullt þarftu að fylgja samfélagsleiðbeiningum um rétta förgun íláts fyrir oddhvassa hluti.

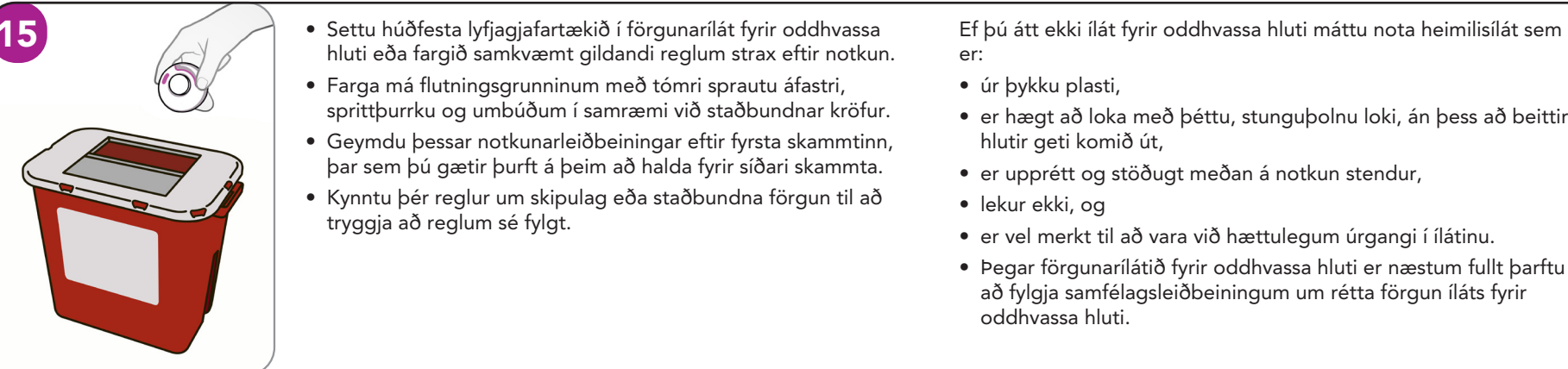


- Ekki farga fullum förgunarílátum fyrir oddhvassa hluti í ruslið nema samfélagsleiðbeiningar leyfi það.
- Ekki endurvinnna full förgunarílát fyrir oddhvassa hluti.
- Geymdu notaða húðfesta lyfjagjafartækið og ílát fyrir oddhvassa hluti fjarri þar sem börn ná ekki til.

Hvernig geyma á ASPAVELI® enFuse® húðfesta lyfjagjafarkerfið

- Geymdu húðfesta lyfjagjafarkerfið í óopnuðum bakka inni í upprunalega kassanum.
- Ekki** opna bakkann fyrr en hann er tilbúinn fyrir skammtagjöf.
- Geymdu** húðfesta lyfjagjafarkerfið á hreinu, þurru svæði fjarri hita og sólarljósi, við hitastig 2 °C - 30 °C.
- Notaðu** húðfesta lyfjagjafarkerfið þar sem hitastigið er 5 °C - 40 °C.

Almennar upplýsingar

- Húðfesta lyfjagjafartækið er eingöngu ætlað til lyfjagjafar undir húð með pegcetacoplan.
- Áfyllingarrúmmál húðfesta lyfjagjafartækisins er 20 ml.
- Sjá merkimiða apóteks fyrir áfyllingarmagn og tímalengd lyfjagjafar.

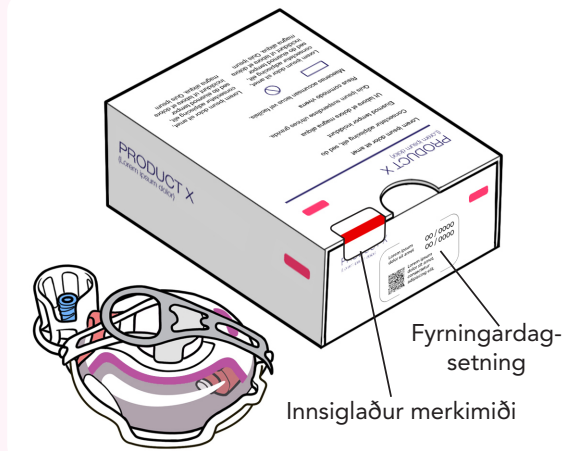

Spurningar og svör

Get ég notað meira en eina sprautu til að fylla á húðfesta lyfjagjafartækið?

Nei, notaðu aðeins eina sprautu fyrir hvert húðfest lyfjagjafartæki.

Get ég fjarlægt húðfesta lyfjagjafartækið úr kviðnum og sett það á síðar til að klára skammtagjöfina?

Nei. Ekki er hægt að tengja húðfesta lyfjagjafartækið aftur. Sé það fjarlægt gæti verið að ekki allur skammturinn sé gefinn.

Hvað ætti ég að gera ef skammtagjöf tekur meira en tvær klukkustundir?

Ýttu á og haltu inni hnappinum á meðan þú fjarlægir húðfesta lyfjagjafartækið úr húð sjúklingsins. Settu húðfesta lyfjagjafartækið til hliðar. Ráðfærðu þig við lækinn sem ávísar lyfinu.

⚠ **Ekki** snerta botninn á húðfesta lyfjagjafartækinu þar sem nálin verður afhjúpuð.

Hvað ef ég reyni að nota húðfesta lyfjagjafartækið aftur?

Húðfesta lyfjagjafartækið er hannað til að læsast eftir að skammturinn hefur verið gefinn og ekki er hægt að nota það aftur. Ekki er hægt að sótthreinsa húðfesta lyfjagjafarkerfið á ný.

Hugsanlegir fylgikvillar

Hvað ef hnappurinn þrýstist ekki inn og læsist?

Gakktu úr skugga um að þú hafir fjarlægt rauða öryggisflípann. Ef öryggisflípann er fjarlægður skaltu ganga úr skugga um að þú hafir reynt að ýta hnappinum alla leið inn. Ef þú getur enn ekki ýtt hnappinum alla leið inn, þá skemmist húðfesta lyfjagjafartækið. Fjarlægðu húðfesta lyfjagjafartækið og settu það til hliðar. Opnaðu nýtt húðfest lyfjagjafarkerfi og byrjaðu upp á nýtt.

Hvað ætti ég að gera ef stimpill sprautunnar þrýstir ekki niður til að fylla á húðfesta lyfjagjafartækið?

Þú verður að þrýsta stimplinum þétt niður til að fylla á húðfesta lyfjagjafartækið. Þú munt finna fyrir mótstöðu.

Hvað ef húðfesta lyfjagjafartækið dettur af?

Ef húðfesta lyfjagjafartækið dettur af meginhlutanum skaltu taka það varlega upp. Ekki snerta nálina eða lyfjavöru sem kunna að vera á húðfesta lyfjagjafartækinu. Settu húðfesta lyfjagjafartækið til hliðar. Ráðfærðu þig við lækinn sem ávísar lyfinu.

Önnur hugsanleg áhætta

- Staðbundin viðbrögð á stungustað svo sem staðbundin bólga í vefjum, erting, þroti eða áverki
- Minniháttar marblettir, mar, minniháttar stunguáverkar eða skurðir
- Altæk sýking vegna útsetningar fyrir sýklum sem berast með blóði

Tilkynna skal framleiðanda og lögbæru yfirvaldi aðildarríkisins þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn hefur staðfestu um alvarleg atvik varðandi tækið.

Lítilsháttar blæðing er eðlileg. Þú getur þrýst bómullarhnoðra eða grisju á stungustaðinn og hulið hann með litlum sáraumbúðum.

Frábendingar

- Ekki ætlað til notkunar með lífsnauðsynlegum lyfjum.
- Ekki ætlað til notkunar með vörum sem þurfa vandlega stýrðan flæðihraða.
- Ekki ætlað til notkunar á meðgöngu.
- Ekki ætlað til notkunar með lyfjum sem geta valdið varanlegum eða alvarlegum skaða sem krefst læknisfræðilegrar ihlutunar ef það kemst í snertingu við húðina.
- Ekki ætlað til að gefa blóð, blóðafurðir, insúlín, heildarmæringu í æð og fitufleyti.
- Ekki ætlað sjúklingum með akrylofnæmi.